

Blutkulturentnahme

1

Material vorbereiten

Mindestens **2 Sets Blutkulturen** aus 2 verschiedenen Punktionsstellen abnehmen

1 Set = 2 Flaschen (1 **aerob**, 1 **anaerob**)



2

Patientenetikett auf die dafür vorgesehene Stelle aufkleben

Entnahmeort vermerken (ZVK, Arm links...)



3

Hände desinfizieren

Flaschenverschluss entfernen

Wischdesinfektion der Gummimembran



4

Stauschlauch anlegen

Geeignete Vene palpieren / aufsuchen


2x Sprü-/Wischdesinfektion



5

Nach der 2. Desinfektion nicht mehr Tasten

20 ml Blut / Entnahmestelle entnehmen

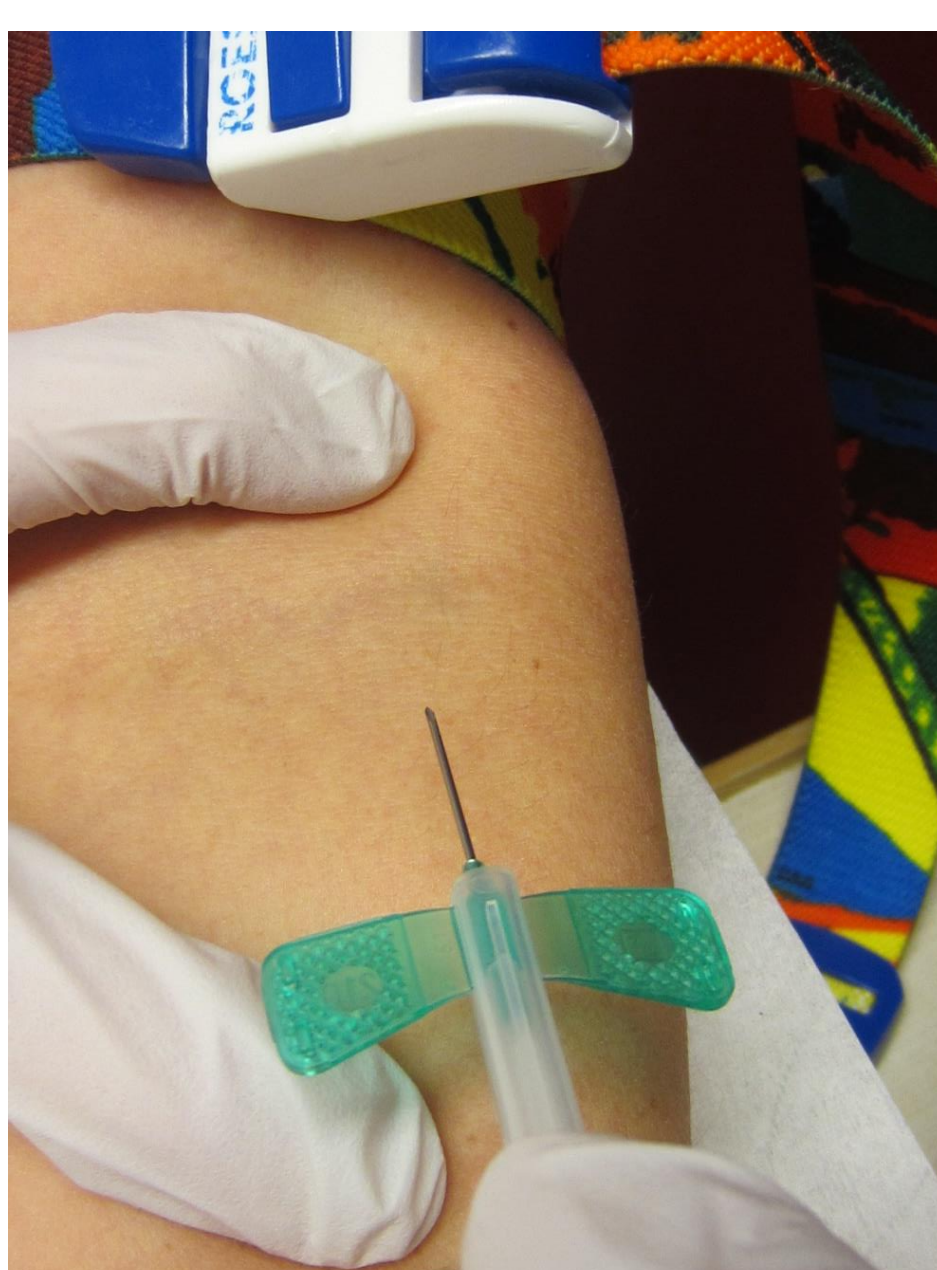

6

Flaschen mit je 10ml Blut befüllen

Aufziehkanüle (18G) verwenden

Spritzgefahr beim Befüllen!

Flaschen stehen unter Sog

Anaerobe Flasche zuerst

